


Quick Start Guide

SIMPLEX sliceware / SIMPLEX print



SIMPLEX sliceware

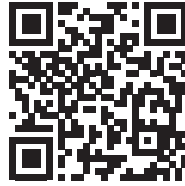

myRenfert
Login



Zum Software Download müssen Sie sich bei „myRenfert“ anmelden und Ihren SIMPLEX 3D-Filament-Drucker registrieren.

Login


⇒ Melden Sie sich auf der Renfert Internetseite www.renfert.com bei „myRenfert“ mit Ihren Anmeldedaten an, oder verwenden Sie dazu den obigen QR-Code.



⇒ Falls Sie noch kein Konto bei „myRenfert“ haben, müssen Sie sich vorher über „myRenfert“ registrieren.

SIMPLEX 3D Filament-Drucker registrieren

- ⇒ Wählen Sie „Gerät registrieren“.
- ⇒ Geben Sie die Seriennummer des Geräts ein. Diese finden Sie auf dem Geräte-Typenschild.
- ⇒ Wenn gewünscht, können Sie zusätzlich einen Kommentar zu dem Gerät eingeben.
- ⇒ Klicken Sie auf „Übermitteln“.
- ◆ Registrierte Geräte werden unter „Meine Geräte“ angezeigt.

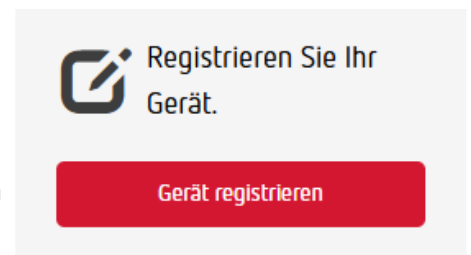

Download


Nach der Registrierung des Produkts können Sie das Softwarepaket mit folgenden Komponenten herunterladen:

- SIMPLEX sliceware;
 - Anleitung zu SIMPLEX sliceware;
 - SIMPLEX print;
 - Versions-Informationen
- ⇒ Wählen Sie „Meine Geräte“.
- ⇒ Klicken Sie bei Ihrem Gerät auf „Details“ - „Software Download“ - „Zum Download“ - „Download File“.
- ◆ Das Programmpaket wird als ZIP-Datei auf Ihren Rechner heruntergeladen.
- ⇒ Öffnen Sie das Download-Verzeichnis auf Ihrem PC.
- ⇒ Entpacken Sie die ZIP-Datei.
- ⇒ Starten Sie das Programm „Simplex_Print_....._installer.exe“ und folgen Sie den Anweisungen.
- ◆ Das Programm SIMPLEX print wird auf Ihrem PC installiert.
- ⇒ Starten Sie das Programm „sliceware_....._installer.exe“ und folgen Sie den Anweisungen.
- ◆ Das Programm SIMPLEX sliceware wird auf Ihrem PC installiert.

To download the software, you must log in to “myRenfert” and register your SIMPLEX 3D filament printer.

Login


⇒ Log in to “myRenfert” on the Renfert website www.renfert.com with your credentials.

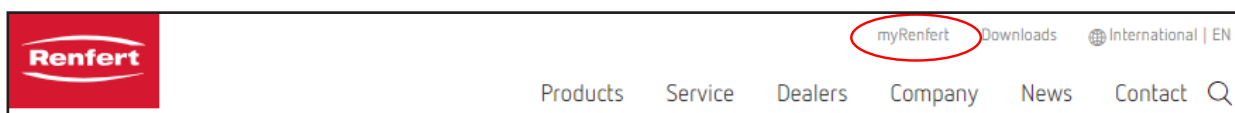

⇒ If you do not yet have a “myRenfert” account, you must first register via “myRenfert”.

Register your SIMPLEX 3D filament printer

- ⇒ Select „Register device“.
- ⇒ Enter the serial number of your equipment. You can find it on the type plate of your equipment.
- ⇒ If desired, you can also enter a comment about the equipment.
- ⇒ Click on “Submit”.
 - ◆ The registered equipment is displayed under „My Devices“.

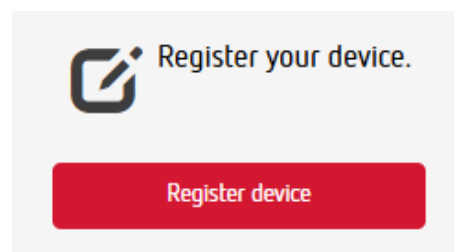

Download

After registering the product, you can download the software package with the following components:

- SIMPLEX sliceware;
 - SIMPLEX sliceware instructions;
 - SIMPLEX print;
 - Version information
- ⇒ Select “My Devices”.
- ⇒ At your device click on “Details” - „Software Download“ - „Go to Download“ - „Download File“.
- ◆ The software package is downloaded to your computer as a ZIP file.
- ⇒ Open the download directory on your PC.
- ⇒ Unzip the ZIP file.
- ⇒ Click on “Simplex_Print_....._installer.exe” and follow the instructions.
- ◆ The SIMPLEX print software will be installed on your PC.
- ⇒ Click on “sliceware_....._installer.exe” and follow the instructions.
- ◆ The SIMPLEX sliceware software will be installed on your PC.

Pour télécharger le logiciel, vous devez vous connecter à « myRenfert » et enregistrer votre imprimante à filament SIMPLEX 3D.

Connexion


⇒ Sur le site Renfert www.renfert.com, connectez-vous à « myRenfert » avec vos identifiants de connexion.



⇒ Si vous n’avez pas encore de compte pour « myRenfert », vous devez d’abord vous enregistrer sur « myRenfert ».

Enregistrer l’imprimante à filament SIMPLEX 3D

- ⇒ Sélectionnez « Register device ».
- ⇒ Indiquez le numéro de série de votre appareil. Il figure sur sa plaque signalétique.
- ⇒ Si vous le souhaitez, vous pouvez également saisir un commentaire sur l’appareil.
- ⇒ Cliquez ensuite sur « Submit ».
- ◆ L’appareil enregistré apparaît sous « My Devices ».

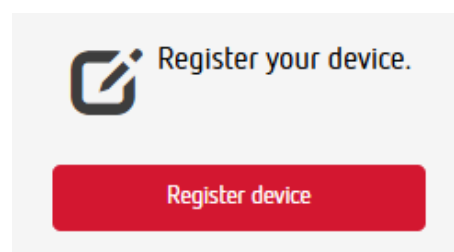

Téléchargement

Après l'enregistrement du produit, vous pouvez télécharger le pack logiciel avec les composants suivants :

- Logiciel SIMPLEX sliceware ;
- Introduction au logiciel SIMPLEX sliceware ;
- SIMPLEX print ;
- Informations sur la version

⇒ Sélectionnez « My Devices ».

⇒ Sur votre appareil, cliquez sur « Details » - « Software Download » - « Go to Download » - « Download File ».

◆ Le pack de programmes est téléchargé sur votre ordinateur sous forme de fichier ZIP.

⇒ Ouvrez le dossier Téléchargements sur votre ordinateur.

⇒ Dézippez le fichier ZIP.

⇒ Démarrez le programme « Simplex_Print_....._installer.exe » et suivez les consignes.

◆ Le programme SIMPLEX print est installé sur votre PC.

⇒ Démarrez le programme « sliceware_....._installer.exe » et suivez les consignes.


◆ Le logiciel slicer SIMPLEX est installé sur votre PC.

it

Per scaricare il download è necessario eseguire il login in “myRenfert” e registrare la propria stampante a filamento SIMPLEX 3D.

Login

⇒ Registrarsi al sito Internet di Renfert www.renfert.com alla voce “myRenfert” usando i propri dati di accesso.

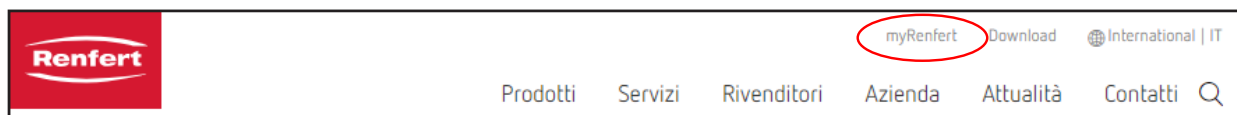

⇒ Se non si dispone ancora di un account in “myRenfert” è necessario effettuare dapprima la registrazione in “myRenfert”.

Registrazione della stampante a filamento SIMPLEX 3D


⇒ Selezionare „Register device“.

⇒ Inserire il numero di serie del dispositivo riportato sulla targhetta del dispositivo.

⇒ Se lo desideri, puoi anche inserire un commento sul dispositivo.

⇒ Cliccare su “Submit”.

◆ Il dispositivo registrato viene visualizzato in “My Devices”.

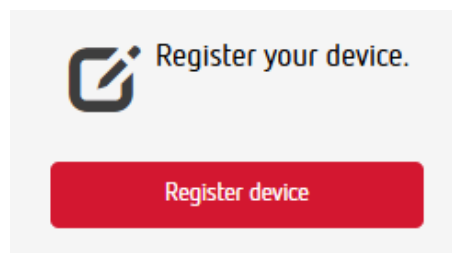

Download

Dopo la registrazione del prodotto è possibile scaricare il pacchetto software con i seguenti componenti:

- SIMPLEX sliceware;
- Istruzioni per SIMPLEX sliceware;
- SIMPLEX print;
- Informazioni sulle versioni

⇒ Selezionare “My Devices”.

⇒ In corrispondenza del proprio dispositivo fare clic su „Details“ - „Software Download“ - „Go to Download“ - „Download File“.

◆ Il pacchetto con il programma verrà scaricato come file ZIP sul proprio calcolatore.

⇒ Passare alla cartella di download sul proprio PC.

⇒ Decomprimare il file ZIP.

⇒ Avviare il programma “Simplex_Print_....._installer.exe” e seguire le istruzioni.

◆ Il programma SIMPLEX print verrà installato sul proprio PC.

⇒ Avviare il programma “sliceware_....._installer.exe” e seguire le istruzioni.

◆ Il programma SIMPLEX sliceware verrà installato sul proprio PC.

Inicio de sesión


⇒ Inicie sesión en la página de internet de Renfert www.renfert.com en “myRenfert” con sus datos de acceso.



⇒ Si aún no posee una cuenta en “myRenfert”, primero debe registrarse en “myRenfert”.

Registro de la impresora por filamento SIMPLEX 3D

- ⇒ Seleccione „Register device“.
- ⇒ Introduzca el número de serie del aparato, que se encuentra en la placa de características del aparato.
- ⇒ Si lo desea, también puede ingresar un comentario sobre el dispositivo.
- ⇒ Haga clic en “Submit”.
 - ♦ El aparato registrado se muestra en “My Devices”.

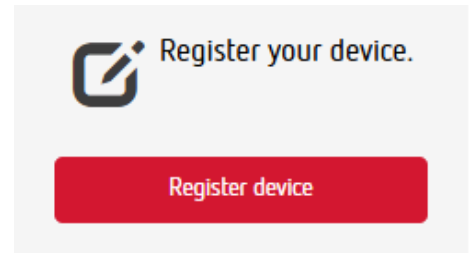

Descarga

Después de registrar el producto, puede descargar el paquete de software con los siguientes componentes:

- SIMPLEX sliceware;
 - Manual de instrucciones de SIMPLEX sliceware;
 - SIMPLEX print;
 - Información sobre la versión
- ⇒ Seleccione “My Devices”.
- ⇒ En su aparato, haga clic en „Details“ - „Software Download“ - „Go to Download“ - „Download File“.
- ♦ El paquete de programa se descarga como un archivo ZIP en su ordenador.
- ⇒ Abra el directorio de descarga en su PC.
- ⇒ Extraiga el archivo ZIP.
- ⇒ Inicie el programa “Simplex_Print_....._installer.exe” y siga las instrucciones.
- ♦ El programa SIMPLEX print se instala en su PC.
- ⇒ Inicie el programa “sliceware_....._installer.exe” y siga las instrucciones.
- ♦ El programa SIMPLEX sliceware se instala en su PC.