



making work easy

The background of the advertisement is a close-up photograph showing a dental procedure. A hand holds a small, white, translucent dental restoration. A dark-colored dental handpiece is being used to polish the restoration with a rotating, dark, circular polishing wheel. The scene is brightly lit, highlighting the smooth, polished surface of the restoration and the texture of the hand and handpiece.

Renfert Polish ZrO_2 starter kit

NEU

Polierset für Restaurationen aus Zirkoniumdioxid

NEU Renfert Polish ZrO₂ starter kit

Polierset für Restaurationen aus Zirkoniumdioxid


Das Renfert Polish ZrO₂ starter kit bündelt die zentralen Komponenten für die Bearbeitung von Restaurationen aus Zirkoniumdioxid in einem abgestimmten Set. Polierpaste und Polierkörper sind auf den Werkstoff und typische Indikationen zugeschnitten und unterstützen Anwender dabei, den Polierprozess strukturiert, kontrolliert und mit reproduzierbarem Ergebnis umzusetzen.

Vorteile

- Effizienter Workflow: schnelle und gleichmäßige Politur von Zirkoniumdioxid-Restaurationen für eine zuverlässig glatte Oberfläche.
- Materialschonende Politur: der dreistufige Polierprozess unterstützt eine sichere Oberflächenqualität und führt gezielt zu optimalem Hochglanz.
- Stabiler Hochglanz: optimal abgestimmte Polierkörper-Geometrien ermöglichen einen vielseitigen Einsatz bei monolithischen und teilverblendeten Zirkoniumdioxid-Restaurationen.

Details

- 1. Vorpolitur: Prepolisher ZrO₂
- 2. Vorpolitur: Prepolisher twist ZrO₂
- Hochglanzpolitur: Bison Polierbürste + Renfert Polish ZrO₂ Polierpaste

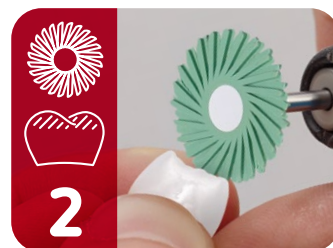

Weitere Poliersets

Renfert Polish 3D-printed materials starter kit: Ein speziell abgestimmtes Starter Kit für die Renfert Diamantpolierpaste Polish 3D-printed materials.



Renfert Polish all-in-one starter kit: Ein speziell abgestimmtes Starter Kit für die Renfert Polierpaste all-in-one.

Bestellinformationen

Renfert Polish ZrO ₂ starter kit		No. 5101200
Renfert Polish ZrO ₂	Polierpaste 13 g	No. 5101100
Prepolisher ZrO ₂ (Linse)	26 mm, 1 Stück	No. 950000
Prepolisher twist ZrO ₂ (Lamellenrad)	26 mm, 1 Stück	No. 951000
Bison	14, 18 mm, 25/100 Stück	No. 76xxx00

Lieferumfang

Renfert Polish ZrO₂ Polierpaste 13 g (No. 5101100), inkl. 1x Prepolisher ZrO₂ (Linse) 26 mm (No. 950000) für die erste Vorpolitur der gesamten Fläche, 1x Prepolisher twist ZrO₂ (Lamellenrad) 26 mm (No. 951000) für die zweite Vorpolitur der gesamten Fläche und 1x Bison Polierbürste 18 mm (No. 7661000) für die Hochglanzpolitur.