



making work easy

The background of the advertisement is a close-up photograph showing a dental procedure. A hand holds a small, white, irregularly shaped dental restoration. A rotary tool with a dark, cylindrical polishing wheel is being used to polish the surface of the restoration. The wheel is in motion, creating a blurred effect. The background is a soft, out-of-focus light blue.

Renfert Polish ZrO_2 starter kit

NOVITÀ Kit di lucidatura per restauri in biossido di zirconio

NOVITÀ Renfert Polish ZrO₂ starter kit

Kit di lucidatura per restauri in biossido di zirconio



Il kit di base Renfert Polish ZrO₂ riunisce in un unico set coordinato i componenti essenziali per trattare i restauri in biossido di zirconio. La pasta e gli strumenti per lucidare sono studiati appositamente per questo materiale e per le indicazioni tipiche, permettendo all'operatore di eseguire la lucidatura in modo strutturato, controllato e con risultati riproducibili.

Vantaggi

- Flusso di lavoro efficiente: lucidatura rapida e omogenea dei restauri in biossido di zirconio per una superficie perfettamente liscia.
- Lucidatura nel rispetto del materiale: il protocollo di lucidatura in tre fasi assicura una qualità ottimale della superficie e una brillantezza mirata.
- Brillantezza duratura: le geometrie perfettamente calibrate degli strumenti permettono un impiego versatile su restauri in biossido di zirconio monolitici e parzialmente stratificati.

Dettagli

- 1ª prelucidatura: Prepolisher ZrO₂
- 2ª prelucidatura: Prepolisher twist ZrO₂
- Lucidatura a specchio: spazzola per lucidare Bison + pasta per lucidare Renfert Polish ZrO₂

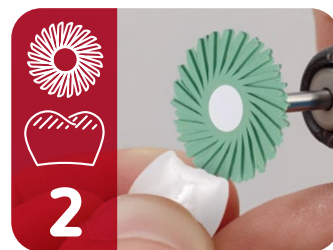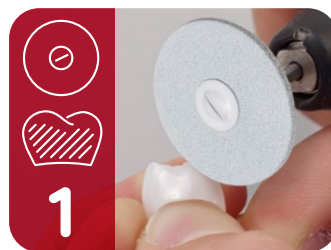

Altri set di lucidatura

Renfert Polish 3D-printed materials starter kit: Un kit di base appositamente studiato per la pasta diamantata per lucidare Renfert Polish 3D-printed materials.



Renfert Polish all-in-one starter kit: Un kit di base appositamente studiato per la pasta per lucidare Renfert Polish all-in-one.

Referenze

Renfert Polish ZrO ₂ starter kit		No. 5101200
Renfert Polish ZrO ₂	Pasta per lucidare 13 g	No. 5101100
Prepolisher ZrO ₂ (lente)	26 mm, 1 pezzo	No. 95 0000
Prepolisher twist ZrO ₂ (ruota a lamelle)	26 mm, 1 pezzo	No. 95 1000
Bison	14, 18 mm, 25/100 pezzi	No. 76xxx00

Dotazione

Renfert Polish ZrO₂ pasta per lucidare 13 g (No. 5101100), incl. 1x Prepolisher ZrO₂ (lente) 26 mm (No. 95 0000) per la prima prelucidatura dell'intera superficie, 1x Prepolisher twist ZrO₂ (ruota a lamelle) 26 mm (No. 95 1000) per la seconda prelucidatura dell'intera superficie e 1x spazzola per lucidare Bison 18 mm (No. 766 1000) per la lucidatura a specchio.

