



making work easy

The background of the advertisement is a close-up photograph of a dental procedure. A hand holds a translucent, shell-like dental restoration. A small, rectangular piece of silver-colored metal is attached to the inner surface of the restoration. A dental handpiece with a dark, cylindrical polishing wheel is shown in motion, polishing the metal piece. The background is a soft, out-of-focus light blue and white.

Renfert Polish ZrO_2 starter kit

NOVIDADE

Kit de polimento para restaurações
em dióxido de zircônio

NOVIDADE Renfert Polish ZrO₂ starter kit

Kit de polimento para restaurações em dióxido de zircônio

O kit inicial Renfert Polish ZrO₂ reúne, em um conjunto harmonizado, os componentes essenciais para o tratamento de restaurações em dióxido de zircônio. A pasta de polimento e os polidores são adaptados ao material e às indicações típicas, e ajudam os usuários a realizar o polimento de forma estruturada, controlada e com resultados reprodutíveis.

Vantagens

- Fluxo de trabalho eficiente: polimento rápido e uniforme de restaurações de dióxido de zircônio para uma superfície totalmente lisa.
- Polimento cuidadoso com o material: o polimento em três etapas garante uma qualidade segura da superfície e proporciona, de forma direcionada, um alto brilho ideal.
- Alto brilho estável: as geometrias perfeitamente ajustadas dos polidores permitem uma aplicação versátil em restaurações em dióxido de zircônio monolíticas e parcialmente estratificadas.

Detalhes



- 1º pré-polimento: Prepolisher ZrO₂
- 2º pré-polimento: Prepolisher twist ZrO₂
- Polimento de alto brilho: escova de polimento Bison + pasta de polimento Renfert Polish ZrO₂

Outros kits de polimento

Renfert Polish 3D-printed materials starter kit: Kit inicial especialmente desenvolvido para a pasta de polimento diamantada Renfert Polish 3D printed materials.



Renfert Polish all-in-one starter kit: Kit inicial especialmente desenvolvido para a pasta de polimento Renfert Polish all-in-one.

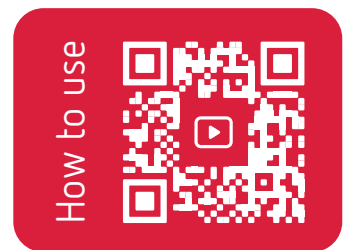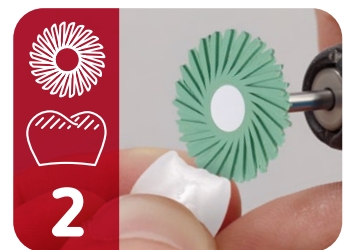

Informações para encomenda

Renfert Polish ZrO ₂ starter kit		Nº 5101200
Renfert Polish ZrO ₂	Pasta de polimento 13 g	Nº 5101100
Prepolisher ZrO ₂ (lente)	26 mm, 1 unidade	Nº 95 0000
Prepolisher twist ZrO ₂ (disco com lamelas flexíveis)	26 mm, 1 unidade	Nº 95 1000
Bison	14, 18 mm, 25/100 unidades	Nº 76xxx00

Fornecimento

Renfert Polish ZrO₂ pasta de polimento 13 g (Nº 5101100), incl. 1x Prepolisher ZrO₂ (lente) 26 mm (Nº 95 0000) para o primeiro pré-polimento de toda a superfície, 1x Prepolisher twist ZrO₂ (disco com lamelas flexíveis) 26 mm (Nº 95 1000) para o segundo pré-polimento de toda a superfície e 1x escova de polimento Bison 18 mm (Nº 766 1000) para o polimento de alto brilho.