



making work easy

Стартовый набор

Renfert Polish ZrO_2

новинка

Набор для полировки реставраций
из диоксида циркония

НОВИНКА Стартовый набор Renfert Polish ZrO₂

Набор для полировки реставраций из диоксида циркония


Стартовый набор Renfert Polish ZrO₂ объединяет в одном комплекте основные компоненты для полировки реставраций из диоксида циркония. Полировальная паста и инструменты для полировки специально разработаны с учетом особенностей материала и типичных показаний и помогают пользователям осуществлять процесс полировки структурированно, контролируемо и с воспроизводимым результатом.

Преимущества

- Эффективный рабочий процесс: быстрая и равномерная полировка реставраций из диоксида циркония для получения надежно гладкой поверхности.
- Полировка, щадящая материал: трехэтапный процесс полировки обеспечивает надежное качество поверхности и целенаправленно приводит к оптимальному зеркальному блеску.
- Стабильный зеркальный блеск: оптимально подобранная геометрия полиров обеспечивает их универсальное применение как для монолитных, так и для облицованных реставраций из диоксида циркония.

Детали

- Первая предварительная полировка: Полировочная линза Prepolisher ZrO₂
- Вторая предварительная полировка: Лепестковый полир Prepolisher twist ZrO₂
- Зеркальная полировка: Полировочная щётка Bison + Полировочная паста Renfert Polish ZrO₂

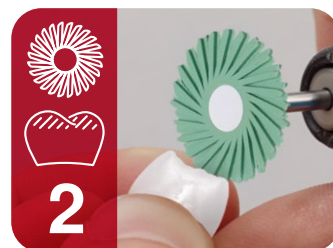

Другие наборы для полировки

Стартовый набор Renfert Polish 3D-printed materials: Специально подобранный стартовый набор для аполировки напечатанных изделий из полимеров.



Стартовый набор Renfert all-in-one: Специально подобранный стартовый набор для полировки изделий из керамики и композитов.

Информация для заказа

Стартовый набор Renfert Polish ZrO ₂		Арт. № 510 1200
Renfert Polish ZrO ₂	Полировочная паста 13 г	Арт. № 510 1100
Полировочная линза Prepolisher ZrO ₂	26 мм, 1 шт.	Арт. № 95 0000
Лепестковый полир Prepolisher twist ZrO ₂	26 мм, 1 шт.	Арт. № 95 1000
Bison	14, 18 мм, 25/100 шт.	Арт. № 76xxx00

Объем поставки

Полировочная паста Renfert Polish ZrO₂, 13 г (арт. № 510 1100), Полировочная линза Prepolisher ZrO₂ 26 мм (арт. № 95 0000) для первой предварительной полировки всей поверхности, 1 шт.; Лепестковый полир Prepolisher twist ZrO₂, 26 мм (арт. № 95 1000) для второй предварительной полировки всей поверхности, 1 шт.; Полировочная щётка Bison 18 мм (арт. № 766 1000) для зеркальной полировки, 1 шт.