

Renfert

making work easy




EASY blank wax

NOVIDADE Disco de cera para fresagem CAD/CAM

EASY blank wax

Disco de cera para fresagem CAD/CAM

Disco de cera para fresagem CAD/CAM para a confecção de coroas e pontes modeladas virtualmente para as técnicas de prensagem e fundição.

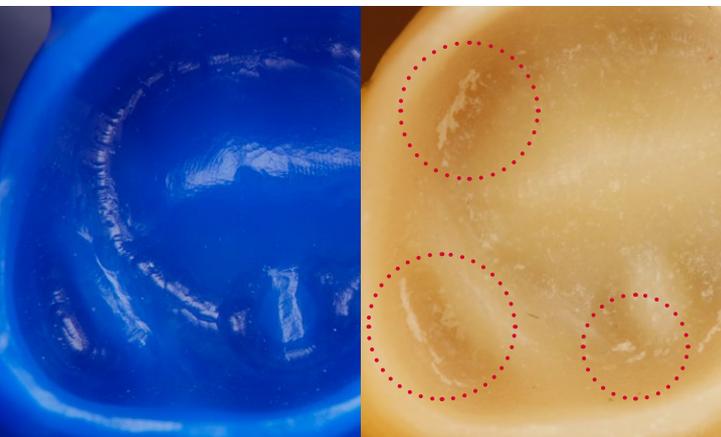

Padrão de fresagem:
Formação de aparas
Renfert EASYblank wax

Padrão de fresagem:
Formação de aparas
produto competitivo

Dados técnicos

	No. 7700014	No. 7700020
Dimensões (Ø x A)	Ø 98,5 mm x 14 mm (com bordo de 10 mm)	Ø 98,5 mm x 20 mm (com bordo de 10 mm)
Ponto de gota	100–120°C	100–120°C
Peso	aprox. 99 g	aprox. 138 g
Cor	azul	azul

Informações para encomenda

1 EASY blank wax, Ø 98,5 x 14 mm, 1 unidade	No. 7700014
2 EASY blank wax, Ø 98,5 x 20 mm, 1 unidade	No. 7700020

Vantagens

- Resultados precisos de fresagem com superfície muito lisa e alta estabilidade em arestas graças à elevada homogeneidade do material.
- Particularmente adequado para peças totalmente cerâmica pois queima sem deixar resíduos.
- Processo de fresagem seguro com formação de aparas pequenas que no adhiere à broca ou à superfície do objeto.

Making work easy

O Renfert EASY blank wax é o disco de cera para fresagem CAD/CAM ideal para restaurações fresadas com a habitual qualidade Renfert "made in Germany".

"Making work easy" traduz-se em características excepcionais do produto, por exemplo, elevada homogeneidade do material. Isto assegura, entre outros, um ajuste perfeito e qualidades da superfície na restauração final.

