



Renfert

making work easy

SILENT XS

NEU

Die mobile Absaugung für präzise Nacharbeiten

NEU SILENT XS

Die mobile Absaugung für präzise Nacharbeiten

Die SILENT XS ist eine vollmobile Absauglösung, speziell entwickelt für Zahnarztpraxen und Mini-Labore. Sie überzeugt durch ihre kompakte Bauweise und eignet sich ideal für kleine, punktuelle Nacharbeiten – etwa bei der Bearbeitung von Provisorien, Schienen oder Prothesen. Mit hoher Saugkraft erfasst sie Schleifstaub direkt am Entstehungsort und sorgt für ein sauberes Arbeitsumfeld. Dank Akkubetrieb lässt sich das Gerät flexibel zwischen verschiedenen Einsatzorten bewegen. Der leise Betrieb macht sie zum idealen Begleiter für effizientes Arbeiten – auch bei mobilen Einsätzen.

Vorteile

- Flexibel – Kabelloser Akkubetrieb für maximale Bewegungsfreiheit – vom Behandlungsstuhl bis zum Minilabor.
- Einfach – Einhandbedienung und LED-Beleuchtung für optimale Sicht auf die Arbeit. Ideal für kurze Schleifjobs.
- Sauber – Saubere Arbeitsluft und effektiver Staubschutz durch H13/HEPA-Filter mit 99,99 % Abscheidegrad. Beutellos.

Details

- Geräuscharmer Betrieb für eine ruhige Arbeitsatmosphäre in der Behandlungsumgebung
- Kompakte Bauweise für platzsparende Integration, einfach zu verstauen
- Lange Einsatzzeiten durch Akku- und Netzbetrieb
- Einfache Reinigung durch glatte, desinfizierbare Oberflächen in einem validierten Prozess
- Praktische Handhabung durch ergonomisches Design und Einhandbedienung



easy use




silent



perfect view



compact

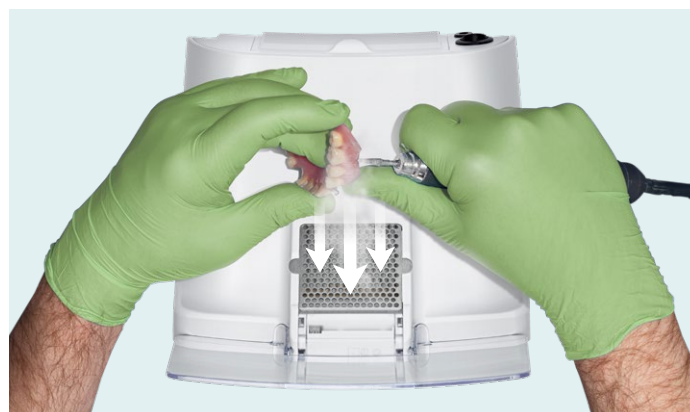

Effektive Schleifstauberfassung mit praktischem Schutzgitter – für sauberes und sicheres Arbeiten

Technische Daten

Zulässige Netzspannung (Netzteil)	100–240 V
Zulässige Netzfrequenz (Netzteil)	50–60 Hz
Volumenstrom (max.)	510 l/min
Filtertechnik	Feinfilter
Filterqualität	HEPA / H13
Schalldruckpegel (LpA bei max. Volumenstrom)	52,7 dB (A)
Gewicht (ohne Akku)	1,12 kg
Maße (B x H x T) inkl. Scheibe	223 x 248 x 193 mm
Akku (nicht im Lieferumfang)	8 x AA (NiMH wiederaufladbar)
Achtung: keine Li-Ion verwenden!	

Bestellinformationen

SILENT XS	No. 29220000
SILENT XS, US / JP	No. 29221000
SILENT XS, ROW	No. 29223000
Arbeitskloben	No. 29220001
Filterset (3 Stück inkl. Abluftfilter)	No. 29220002