

Renfert

making work easy



SIMPLEX model isolation

NOVITÀ

Isolante per modelli stampati in 3D

NOVITA' SIMPLEX model isolation

Isolante per modelli stampati in 3D

SIMPLEX model isolation è appositamente studiato come isolante per modelli realizzati tramite stampa in 3D. Questo isolante pronto all'uso consente di confezionare facilmente gli apparecchi ortodontici in resina dentale sul modello stampato. Applicato con un pennello, crea una pellicola isolante uniforme ed estremamente sottile sulla superficie del modello. Il risultato è una separazione netta tra il modello e la resina dentale. Dopo la polimerizzazione, il manufatto realizzato può essere facilmente sollevato dal modello, conservando tutti i dettagli della superficie.

Vantaggi

- Studiato appositamente per modelli in filament realizzati tramite stampa in 3D per isolare i modelli stessi nella realizzazione di apparecchi ortodontici mobili.
- Adatto anche per modelli prodotti con processi di stampa SLA/DLP.
- Una sola applicazione è sufficiente per la separazione ottimale del manufatto dal modello.
- Completamente solubile in acqua, non richiede rimozione con getto di vapore, per un'applicazione facile e nel rispetto del materiale.


Dettagli

- Privo di ingredienti nocivi.
- Perfetta azione isolante.
- Ottimale pellicola isolante estremamente sottile.
- Completamente solubile in acqua.
- Delicato sul materiale.

Making work easy

L'isolante sviluppato per modelli realizzati tramite stampa in 3D completa il processo di lavoro ortodontico basato sulla tecnologia digitale. Come per l'intero sistema di stampante 3D a filamento SIMPLEX, è stata prestata grande attenzione all'applicazione pratica e sicura dell'isolante per modelli. SIMPLEX model isolation è facile da usare e richiede poco tempo.

PREMIUM QUALITY
MADE IN GERMANY

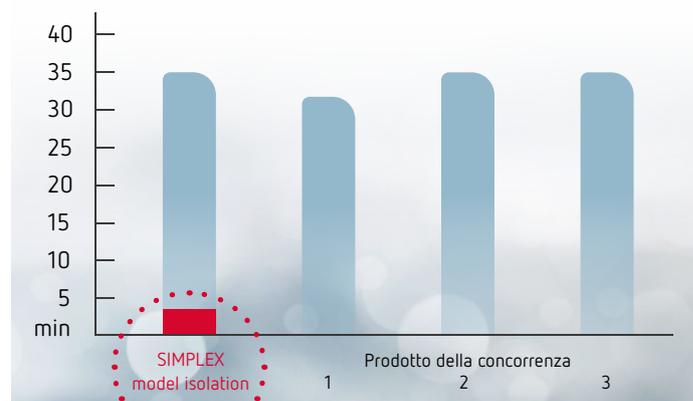

Riduzione del 90% del tempo di asciugatura utilizzando un dispositivo di fotopolimerizzazione o una caviglia di aspirazione



SIMPLEX model isolation consente di confezionare facilmente degli oggetti in resina dentale sul modello stampato

Referenze

SIMPLEX model isolation, 80 g

No. 17350010