

The Renfert logo consists of the word "Renfert" in a white, bold, sans-serif font, centered within a red rectangular background. The text is flanked by two white, curved lines that resemble a stylized 'R' or a protective shield.

making work easy

A close-up photograph showing a pair of hands in blue nitrile gloves. The left hand holds a 3D printed tooth model, while the right hand uses a dental handpiece with a red, circular, multi-faceted polishing bur to polish the tooth. The background is a soft, out-of-focus light blue.

# Renfert Polish 3D-printed materials

**NOVEDAD** Sistema de pulido para impresión 3D

# NOVEDAD Renfert Polish 3D-printed materials

Especialista para el pulido de materiales poliméricos impresos

«Renfert Polish 3D-printed materials» es una pasta de pulido para resinas impresas en 3D que alisa de forma controlada las líneas de estratificación y las marcas de los soportes. Está desarrollada para resinas impresas en 3D y se puede utilizar en diversas tecnologías, por ejemplo, para restauraciones impresas con filamento de PMMA/PETG, así como para restauraciones de coronas y puentes de resina. Un kit inicial con pasta de pulido y pulidores para el pulido previo y de alto brillo está disponible opcionalmente.




## Ventajas

- Desarrollada especialmente para el pulido de provisionales fabricados mediante impresión 3D.
- Superficies lisas y pulidas rápidamente para obtener resultados con un brillo natural gracias a los pulidores adaptados y a la pasta de pulido especialmente desarrollada.
- Garantiza superficies higiénicas y uso confortable de la prótesis gracias a la menor acumulación de placa y bacterias.

## Detalles

- Pre-pulido: Prepolisher 3D side + Prepolisher 3D top
- Pulido: Bison + Renfert Polish 3D-printed materials
- Pulido de alto brillo: Disco de cuero + Disco de trapo de algodón

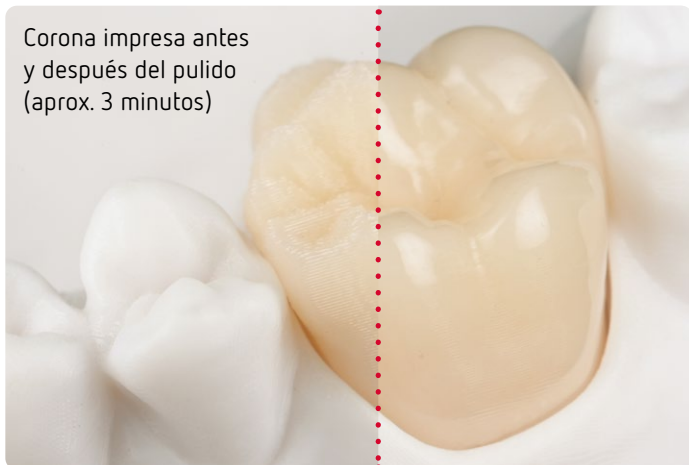

## Referencias

|                                     |                          |             |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Renfert Polish 3D-printed materials | Pasta de pulido 13 g     | No. 5104000 |
| Prepolisher 3D top                  | 17 mm, 1 pieza           | No. 880000  |
| Prepolisher 3D side                 | 26 mm, 10 piezas         | No. 870000  |
| Bison                               | 14, 18 mm, 25/100 piezas | No. 76xxx00 |
| Disco de cuero                      | 22 mm, 5 piezas          | No. 2081000 |
| Disco de trapo de algodón           | 22 mm, 12 piezas         | No. 2051000 |
| Renfert Polish 3D-printed materials | Kit inicial              | No. 5104100 |