

The Renfert logo consists of the word "Renfert" in a white, bold, sans-serif font, centered within a red rectangular background. The text is flanked by two white, curved lines that resemble a stylized "R" or a protective shield.

making work easy

A close-up photograph of a dental technician wearing blue nitrile gloves. The technician is using a dental handpiece with a red, circular, multi-faceted polishing bur to polish a 3D-printed tooth. The tooth is held in the technician's left hand, and the handpiece is held in the right hand. The background is a soft, out-of-focus blue and white, suggesting a clinical setting.

Renfert Polish 3D-printed materials

NOUVEAU Système de polissage pour impression 3D

NOUVEAU Renfert Polish 3D-printed materials

Spécialiste pour le polissage de matériaux polymères imprimés


« Renfert Polish 3D-printed materials » est une pâte à polir destinée aux résines imprimées en 3D, qui lisse de manière contrôlée les lignes de stratification et les traces de supports. Elle a été développée pour les résines imprimées en 3D et peut être utilisée indépendamment de la technologie employée – par ex. pour les restaurations imprimées à filament en PMMA et PETG et pour les restaurations de couronnes et de bridges en résine. Un kit de base avec la pâte à polir ainsi que les polissoirs pour le pré-polissage et le polissage grand brillant est disponible en option.

Avantages

- Spécialement conçue pour le polissage des provisoires réalisés par fabrication additive.
- Permet d'obtenir rapidement des surfaces lisses et polies pour un résultat d'un brillant naturel grâce à des polissoirs adaptés et à une pâte à polir développée sur mesure.
- Garantit des surfaces hygiéniques et un confort de port agréable grâce à la réduction des accumulations de plaque dentaire et de bactéries.

Détails

- Prépolissage : Prepolisher 3D side + Prepolisher 3D top
- Polissage : Bison + Renfert Polish 3D-printed materials
- Polissage grand brillant : Disque en cuir + Disque en coton

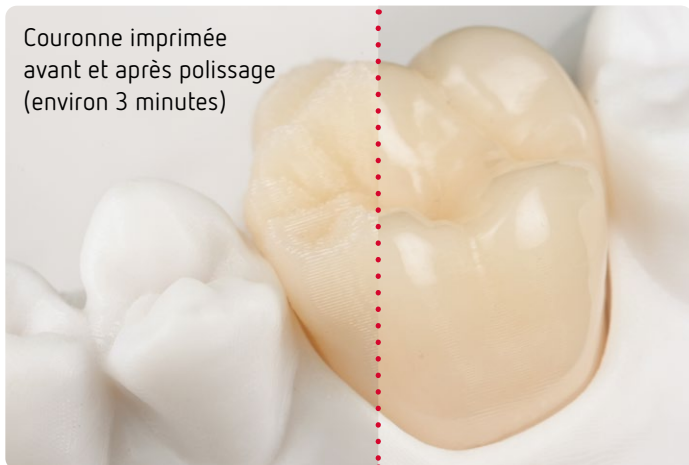

Couronne imprimée avant et après polissage (environ 3 minutes)

Référence

Renfert Polish 3D-printed materials	Pâte à polir 13 g	Réf. 5104000
Prepolisher 3D top	17 mm, 1 pièce	Réf. 8800000
Prepolisher 3D side	26 mm, 10 pièces	Réf. 8700000
Bison	14, 18 mm, 25/100 pièces	Réf. 76xxx00
Disque de polissage en cuir	22 mm, 5 pièces	Réf. 2081000
Disque de polissage en coton	22 mm, 12 pièces	Réf. 2051000
Renfert Polish 3D-printed materials	Kit de base	Réf. 5104000