



Renfert

making work easy

SILENT XS

NOVITÀ

L'aspiratore portatile per ritocchi precisi

NOVITÀ SILENT XS

L'aspiratore portatile per ritocchi precisi

SILENT XS è un aspiratore portatile appositamente sviluppato per lo studio dentistico e il laboratorio odontotecnico interno allo studio. L'apparecchio poco ingombrante è ideale per i piccoli ritocchi, ad esempio quando si lavora su restauri provvisori, bite o protesi. Grazie all'elevata potenza di aspirazione capta le polveri di rettifica direttamente al punto di origine e garantisce un ambiente di lavoro pulito. Grazie al funzionamento a batteria, l'apparecchio può essere spostato in modo flessibile da un luogo all'altro. Con la sua silenziosità l'apparecchio diventa il compagno ideale per un lavoro efficiente e pulito, anche in caso di utilizzo mobile.

Vantaggi

- Versatile: senza cavi, funzionamento a batteria per la massima libertà di movimento – dalla poltrona al laboratorio odontotecnico nello studio.
- Semplice: utilizzo con una sola mano e illuminazione a LED per una visione ottimale del lavoro. Ideale per brevi lavori di rifinitura.
- Pulito: aria di lavoro pulita e protezione efficace dalla polvere grazie al filtro H13/HEPA con grado di separazione del 99,99%. Senza sacchetto.

Dettagli

- Funzionamento a bassa rumorosità per un'atmosfera di lavoro silenziosa nelle sale operative.
- Design compatto per un'integrazione salvaspazio, facile da riporre.
- Lunga durata di funzionamento grazie all'alimentazione a batteria e da rete elettrica.
- Facile pulizia grazie alle superfici lisce e disinfettabili in un processo convalidato.

Dati tecnici

Tensione di rete ammessa (alimentatore)	100–240 V
Frequenza di rete ammessa (alimentatore)	50–60 Hz
Portata volumetrica (max.)	510 l/min
Tecnologia filtro	Filtro fine
Qualità del filtro	HEPA / H13
Livello di pressione acustica (LpA alla max. portata volumetrica)	52,7 dB (A)
Peso (senza batteria)	1,12 kg
Dimensioni (L x A x P), incl. schermo	223 x 248 x 193 mm
Batteria ricaricabile (non inclusa)	8 x AA (NiMH ricaricabile)
Attenzione: Non usare Li-Ion!	



easy use




silent



perfect view



compact

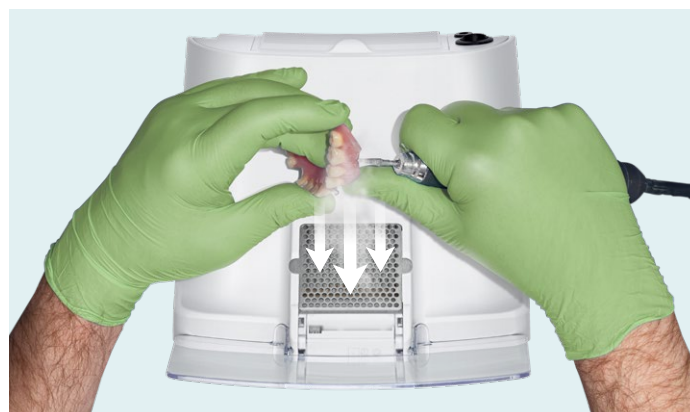

Efficace raccolta della polvere con pratica griglia protettiva – per lavorare in modo pulito e sicuro

Referenze

SILENT XS	No. 29220000
SILENT XS, US / JP	No. 29221000
SILENT XS, ROW	No. 29223000
Morsetto	No. 29220001
Set di filtri (3 pezzi, incl. filtro aria di scarico)	No. 29220002