



making work easy



EASY blank wax


NOVITA'

Disco di cera per sistemi CAD/CAM

EASY blank wax

Disco fresabile di cera per sistemi CAD/CAM

Disco fresabile di cera per sistemi CAD/CAM per la realizzazione di corone e ponti modellati virtualmente per la tecnica di pressatura e di colata.

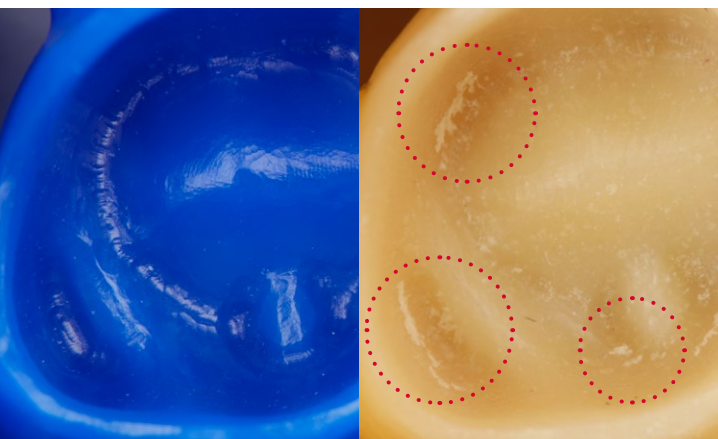

Oggetto fresato:
Formazione di trucioli
Renfert EASYblank wax

Oggetto fresato:
Formazione di trucioli prodotto
della concorrenza

Dati tecnici

	No. 770 0014	No. 770 0020
Dimensioni (Ø x H)	Ø 98,5 mm x 14 mm (con gradino di 10 mm)	Ø 98,5 mm x 20 mm (con gradino di 10 mm)
Punto di gocciolamento	100–120°C	100–120°C
Peso	ca. 99 g	ca. 138 g
Colore	blu	blu

Referenze

1 EASY blank wax, Ø 98,5 x 14 mm, 1 pezzo	No. 770 0014
2 EASY blank wax, Ø 98,5 x 20 mm, 1 pezzo	No. 770 0020

Vantaggi

- Precisi risultati di fresatura con superfici molto lisce e bordi molto stabili grazie all'elevata omogeneità del materiale.
- Particolarmente adatto per ceramica integrale, in quanto calcinabile senza residui.
- Processo di fresatura sicuro grazie alla formazione di trucioli di piccole dimensioni che non si attaccano né alla fresa e né alla superficie dell'oggetto.

Making work easy

Il disco fresabile di cera per sistemi CAD/CAM Renfert EASY blank wax è ideale per restauri dentali fresati nella consueta qualità made in Germany tipica di Renfert. Making work easy è sinonimo di proprietà eccezionali, come l'elevata omogeneità del materiale. Ciò assicura, tra l'altro, un perfetto accoppiamento e un'elevata qualità della superficie nel restauro finale.

