

Pro-Fix

Präzisionspin
mit Kunststoffhülse

Höchste Präzision dank ...

... Easy-Glide-Funktion

- spannungsfreies Abheben aufwändiger Brückenkonstruktionen
 - schnelles Lösen durch kurzen Frikionsweg
- ... angespritzter Kappe
- Schutz vor Eindringen von Gips
 - keine Beschädigung beim Freilegen

Anwendungstipps:

Abb. 1: 2 Pins = maximaler Verdrehschutz

Abb. 2: Zahnkranz herunterdrücken
= erleichtert das Ausdrücken
der Kappen

Abb. 3: Nur beigelegten Metallstift
verwenden = keine Beschädigung
der Frikionsstege

Pro-Fix

Прецизионный штифт с
пластмассовой втулкой

Высочайшая точность благодаря ...

... функции легкого скольжения

- снятие сложных мостовидных конструкций без напряжения
- быстрое снятие благодаря короткому фрикционному пути

... интегрированному колпачку

- предохранение от проникновения гипса
- отсутствие повреждений при вскрытии

Советы для применения:

Снимок 1: Два штифта = максимально возможная защита от вращения

Снимок 2: Нажимание на зубной ряд = облегчает выдавливание колпачков

Снимок 3: Использовать только приложенный металлический штифт = отсутствие повреждений фрикционных ребрышек

Pro-Fix

Precision pin with
acrylic sleeve

Highest precision due to ...

... Easy-Glide-Function

- stress-free lifting of complex bridge framework
- quick release due to short friction paths

... integrated cap

- protects against penetration of plaster
- no damage during trimming

Application tips:

Fig. 1: 2 Pins = prevents rotation

Fig. 2: Press dental arch down
= allows the cap to be removed easily

Fig. 3: Use metal pin provided only
= prevents damage to the friction bars

Pro-Fix

Pin de précision avec
gaine en plastique

Plus haute précision grâce à ...

... la fonction Easy-Glide

- Enlèvement sans tension des constructions de bridges compliquées
- Détachement rapide par course réduite de friction

... capuchon intégré dans la gaine extrudée

- Protection contre la pénétration du plâtre
- Pas de détérioration lors de la mise à nu

Astuces pour utilisation:

Fig. 1: 2 Pins = protection maximale contre la torsion

Fig. 2: Appuyer sur l'arc dentaire = facilite le décollement du capuchon

Fig. 3: Utiliser exclusivement les pins joints = Pas de détérioration des traverses de friction

Pro-Fix

Perno di alta precisione
con guaina in plastica

Massima precisione grazie ...

... alla funzione Easy-Glide

- Sollevare le strutture complesse di ponti senza immettere tensioni
- Estrazione rapida grazie al breve percorso di frizione

... con cappetta integrata

- Protezione contro l'infiltrazione del gesso
- Nessun danneggiamento durante la squadratura basale

Suggerimenti per l'utilizzo:

Fig. 1: 2 perni = massima sicurezza contro la rotazione

Fig. 2: Premere l'arcata verso il basso = facilita la rimozione della cappetta

Fig. 3: Utilizzare solamente il perno metallico allegato = Nessun danno alle nervature di frizione

Pro-Fix

Pin de alta precisión con
manguito de plástico

Máxima precisión gracias a ...

... la función „Easy-Glide“

- Desprendimiento sin esfuerzo alguno de construcciones de puente difíciles
- Separación rápida gracias al corto recorrido de fricción

... la capa integrada por moldeo por inyección

- Protección ante la penetración de yeso
- No se producen daños al recortar el modelo

Sugerencias para el uso:

Fig. 1: 2 pins = máxima protección contra la torsión

Fig. 2: Apretar la arcada dental hacia abajo = facilita la separación de las capas

Fig. 3: Utilizar únicamente la espiga metálica incluida en el volumen de suministro = ningún daño en las barras de fricción

Pro-Fix

プラスチックスリーブ付き
精密ダウエルピン

最高の精度を ...

... イージー・グライド機能によって

- 複雑なブリッジワークにおいても、変形させることなく抜き取ることができます。
- フリクション区間を短く設定したによって、素早く抜けます。

... 射出成型によるキャップ


- 石膏の侵入から保護します。
- 抜き外す工程で、損傷が起りません。

使用上のヒント:


図 1: 2本のピンで、回転防止に最高の効果
図 2: 台付けの際、歯列模型を下に押し付けておくと、キャップの押出しが容易になります。

図 3: フリクション部分の損傷を避けるために、必ず専用のメタルピンを使用して下さい。

Pro-Fix

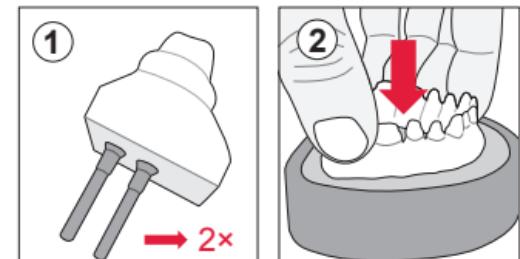

Pro-Fix

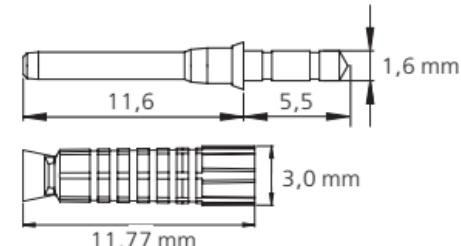

716C 217016

Pro-Fix:

100 / 1000 pcs.

No. 367-1000 / -2000

Smart-Pin

Small Ø 1,57 mm, 3 pcs.,

No. 3670157

Medium Ø 1,59 mm, 3 pcs.

No. 3670159

Large Ø 1,61 mm, 3 pcs.

No. 3670161

Renfert GmbH • Untere Gießwiesen 2
78247 Hilzingen / Germany
www.renfert.com • Made in Germany

Pro-Fix

Neu
New
Nouveau
Novità
Nuevo
Новинка
新製品

Renfert