



Renfert

making work easy

SILENT XS

NOVEDAD

Sistema de aspiración móvil para
retoques precisos

NOVEDAD SILENT XS

Sistema de aspiración móvil para retoques precisos

SILENT XS es un sistema de aspiración completamente portátil desarrollado especialmente para clínicas dentales y laboratorios dentales en clínicas. Su diseño compacto convence y ofrece la solución ideal para pequeños trabajos de acabado selectivos, por ejemplo, en restauraciones provisionales, férulas o prótesis dentales. Con su gran potencia de aspiración, capta el polvo de acabado directamente en el punto de origen y garantiza un entorno de trabajo limpio. Gracias a su funcionamiento con batería, el aparato puede desplazarse con flexibilidad entre varios lugares. Su marcha silenciosa lo convierte en el compañero ideal para un trabajo eficiente, incluso en aplicaciones móviles.

Ventajas

- Flexible: funcionamiento inalámbrico para máxima libertad de movimiento, del sillón dental al laboratorio en la clínica.
- Sencillo: manejo con una sola mano e iluminación LED para trabajar con óptima visibilidad. Ideal para breves trabajos de rectificado.
- Limpio: aire de trabajo limpio y protección eficaz contra el polvo gracias al filtro H13/HEPA con una eficiencia del 99,99 %. Sin saco recogepolvo.

Detalles

- Funcionamiento silencioso para trabajar en un entorno operacional tranquilo.
- Diseño compacto para integrarse en espacios reducidos, fácil de guardar.
- Tiempo prolongado de utilización gracias a su funcionamiento por cable o inalámbrico.



easy use




silent



perfect view



compact

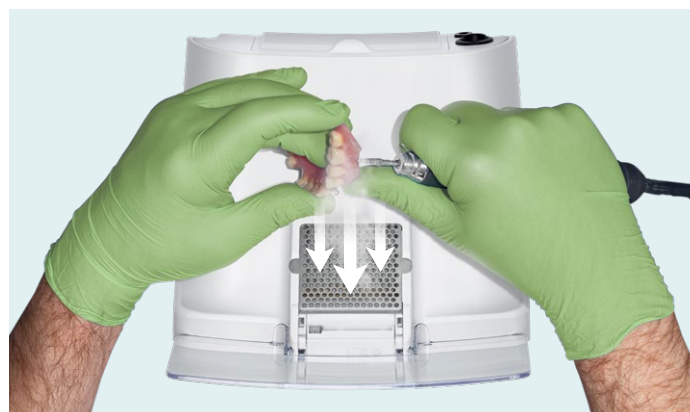

Eficaz aspiración del polvo con práctica rejilla protectora – para un trabajo limpio y seguro

Datos técnicos

Tensión de red admisible (fuente de alimentación)	100–240 V
Frecuencia de red admisible (fuente de alimentación)	50–60 Hz
Caudal (máx.)	510 l/min
Técnica de filtración	Filtro fino
Calidad del filtro	HEPA / H13
Nivel de intensidad acústica (LpA, con caudal máximo)	52,7 dB (A)
Peso (sin batería)	1,12 kg
Dimensiones (An x Al x P), incl. panel	223 x 248 x 193 mm
Batería recargable (no incluida)	8 x AA (NiMH recargable)
¡Atención: no utilizar Li-Ion!	

Referencias

SILENT XS	No. 29220000
SILENT XS, US / JP	No. 29221000
SILENT XS, ROW	No. 29223000
Taco de trabajo	No. 29220001
Juego de filtros (3 piezas incl. filtro aire de escape)	No. 29220002