

The Renfert logo consists of the brand name 'Renfert' in a white, bold, sans-serif font, centered within a red rectangular background. The text is flanked by two white, curved lines that resemble a stylized 'R' or a protective shield.

making work easy

A close-up photograph of a dental technician wearing blue nitrile gloves. The technician is using a dental handpiece with a red, circular, multi-faceted polishing bur to polish a 3D-printed tooth model. The tooth model is held in the technician's left hand, and the handpiece is held in the right hand. The background is a soft, out-of-focus blue and white, suggesting a clinical setting.

Renfert Polish 3D-printed materials

NOVIDADE Sistema de polimento para impressão 3D

NOVIDADE Renfert Polish 3D-printed materials

Especialista para polimento de polímeros impressos

“Renfert Polish 3D-printed materials” é uma pasta de polimento para resinas impressas em 3D, que alisa de forma controlada as linhas de estratificação e os traços de suporte. Foi desenvolvida para polímeros impressos em 3D e pode ser utilizada em diversas tecnologias – por exemplo, para restaurações impressas por filamento em PMMA/PETG, bem como restaurações de coroas e pontes em resina. Um kit inicial com a pasta de polimento e polidores para pré-polimento e polimento de alto brilho está disponível opcionalmente.



Vantagens


- Desenvolvida especificamente para o polimento de provisorios fabricados por manufatura aditiva.
- Superfícies lisas e polidas rapidamente para resultados com brilho natural, graças a polidores específicos e pasta de polimento especialmente desenvolvida.
- Garante superfícies higiênicas e conforto ao uso, reduzindo o acúmulo de placa bacteriana e bactérias.

Detalhes

- Pré-polimento: Prepolisher 3D side + Prepolisher 3D top
- Polimento: Bison + Renfert Polish 3D-printed materials
- Polimento de alto brilho: Polidor de couro + Disco de algodão



Coroa impressa antes e depois do polimento (aprox. 3 minutos)

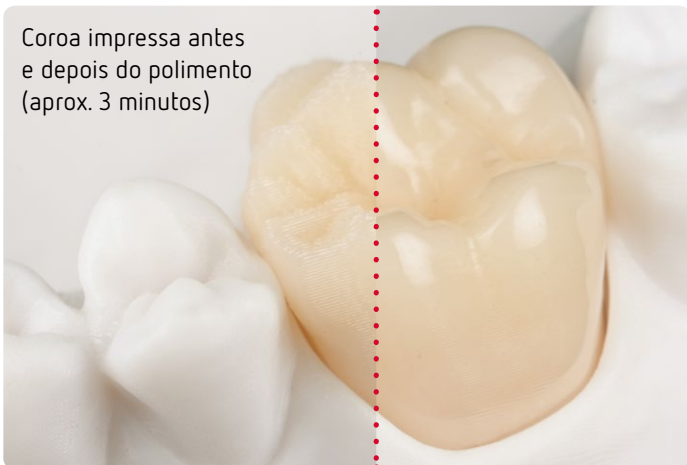

Informações para encomenda

Renfert Polish 3D-printed materials	Pasta de polimento 13 g	Nº 5104000
Prepolisher 3D top	17 mm, 1 unidade	Nº 8800000
Prepolisher 3D side	26 mm, 10 unidades	Nº 8700000
Bison	14, 18 mm, 25/100 unidades	Nº 76xxx00
Polidor de couro	22 mm, 5 unidades	Nº 2081000
Disco de algodão	22 mm, 12 unidades	Nº 2051000
Renfert Polish 3D-printed materials	Kit inicial	Nº 5104100