

Renfert

making work easy



SILENT powerCAM TC

NOVEDAD

Sistema de aspiración de
aparatos para unidades CAM

NOVEDAD SILENT powerCAM TC

Sistema de aspiración de aparatos para unidades CAM

Sistema de aspiración CAM potente y económico con motor colector, especialmente indicado para unidades CAM de tamaños grande y mediano.

Ventajas

- Potencia de aspiración constante gracias a la limpieza automática del filtro.
- Proceso de trabajo seguro gracias a la innovadora tecnología de motor (tiempo de marcha tres veces superior a los motores de colectores convencionales).
- Gran potencia de aspiración de hasta 3980 l/min.

Detalles


- Comunicación bidireccional entre la aspiración y la unidad CAM desde la interfaz de CLP.
- Tecnología de filtro fino sin bolsa de polvo.
- Cambio de motor sencillo en pocos minutos.
- Funcionamiento silencioso gracias al bajo nivel de intensidad acústica con caudal máx. de 54,3 dB (A).



silent



smart control

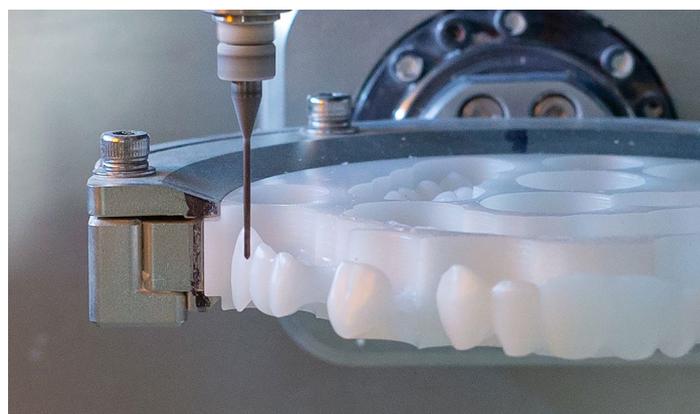

Óptima aspiración de virutas durante el fresado

Características técnicas

Tensión de red admisible	220–240 V 120 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz
Potencia absorbida	850 W (230 V) 750 W (120 V)
Caudal (máx.)	3980 l/min
Presión negativa máx.	281 hPa
Calidad del filtro	Clase M según EN 60335-2-69
Interfaz CAM	Manguito RJ 45
Nivel de intensidad acústica (LpA)	54,3 dB (A)
Peso	~22 kg
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)	275 x 535 x 540 mm
Ø boca de aspiración interior	45 mm
Ø boca de aspiración exterior	50 mm
Capacidad del colector de polvos	~7 l

Referencias

SILENT powerCAM TC, 220–240 V	No. 29380000
SILENT powerCAM TC, 120 V	No. 29381000
Cable de interfaz tipo A para vhf, 5 m	No. 29340005
Cable de interfaz tipo B para Roland DG, 5 m	No. 29340006
Cable de interfaz tipo C para imes-icore, 5 m	No. 29340008
Cable de interfaz tipo D para Amann Girrbaach, 5 m	No. 29340009
Cable de interfaz tipo E para Yenadent, 5 m	No. 29340010
Cable de interfaz tipo F para Zirkonzahn, 5 m	No. 29340011
Cable de interfaz tipo F para Zirkonzahn + adaptador C14, 5 m	No. 29340012
Cable de interfaz tipo G para vhf, 5 m	No. 29340013
Cable de interfaz tipo H para Dentsply Sirona, 5 m	No. 29340016
Cable de interfaz tipo I para Up3D, 2,5 m	No. 29340017
Cable de interfaz tipo J para Canon, 5 m	No. 29340018
Cable de interfaz tipo K para DGShape, 2 m	No. 29340019