



making work easy




EASY blank wax

NOUVEAU Disque à usiner en cire pour CAO/FAO

EASY blank wax

Disque à usiner en cire pour systèmes CAO/FAO

Disque à usiner en cire pour systèmes CAO/FAO conçu pour la confection de couronnes et de bridges modélisés sur ordinateur pour les techniques de pressée et de coulée.

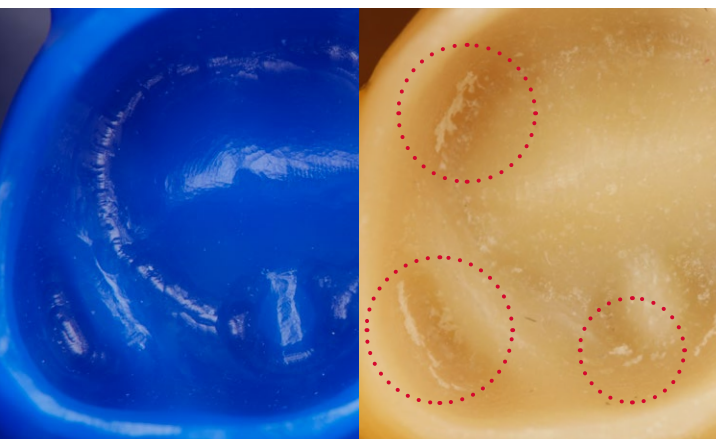

Résultat de fraisage:
Formation de copeaux
Renfert EASYblank wax

Résultat de fraisage:
Formation de copeaux
produit de la concurrence

Données techniques

	No. 770 0014	No. 770 0020
Dimensions (Ø x H)	Ø 98,5 mm x 14 mm (avec rebord circulaire de 10 mm)	Ø 98,5 mm x 20 mm (avec rebord circulaire de 10 mm)
Point de goutte	100–120°C	100–120°C
Poids	env. 99 g	env. 138 g
Couleur	bleu	bleu

Référence

1 EASY blank wax, Ø 98,5 x 14 mm, 1 pièce	No. 770 0014
2 EASY blank wax, Ø 98,5 x 20 mm, 1 pièce	No. 770 0020

Avantages

- Permet d'obtenir des résultats de fraisage nets avec des surfaces très lisses et des arêtes et contours très stables grâce à la grande homogénéité du matériau.
- Convient particulièrement pour les restaurations en tout céramique puisque calcinable sans résidus.
- Fraisage sûr grâce à une formation de petits copeaux sans colmatage de la fraise ni adhérence sur la surface de l'objet.

Making work easy

Le disque à usiner en cire pour systèmes CAO/FAO Renfert EASY blank wax est idéal pour obtenir des restaurations fraisées en profitant de la qualité « made in Germany » typique de Renfert.

La devise « Making work easy » est synonyme de caractéristiques exceptionnelles, comme une grande homogénéité du matériau. Celle-ci garantit, entre autres, une précision parfaite et une qualité irréprochable des surfaces de la restauration finale.



1



2

