

The Renfert logo consists of the word "Renfert" in a white, bold, sans-serif font, centered within a red rectangular background. The text is flanked by two white, curved lines that resemble a stylized 'R' or a protective shield.

making work easy

A close-up photograph showing a pair of hands in blue nitrile gloves. The left hand holds a small, white, 3D-printed tooth model. The right hand holds a dental handpiece with a circular, reddish-brown polishing bur attached. The bur is positioned to polish the surface of the tooth. The background is a soft, out-of-focus light blue and white.

# Renfert Polish 3D-printed materials

**NOVEDAD** Sistema de pulido para impresión 3D

# NOVEDAD Renfert Polish 3D-printed materials

Especialista para el pulido de materiales poliméricos impresos

«Renfert Polish 3D-printed materials» es una pasta de pulido para resinas impresas en 3D que alisa de forma controlada las líneas de estratificación y las marcas de los soportes. Está desarrollada para resinas impresas en 3D y se puede utilizar en diversas tecnologías, por ejemplo, para restauraciones impresas con filamento de PMMA/PETG, así como para restauraciones de coronas y puentes de resina. Un kit inicial con pasta de pulido y pulidores para el pulido previo y de alto brillo está disponible opcionalmente.




## Ventajas

- Desarrollada especialmente para el pulido de provisionales fabricados mediante impresión 3D.
- Superficies lisas y pulidas rápidamente para obtener resultados con un brillo natural gracias a los pulidores adaptados y a la pasta de pulido especialmente desarrollada.
- Garantiza superficies higiénicas y uso confortable de la prótesis gracias a la menor acumulación de placa y bacterias.

## Detalles

- Pre-pulido: Prepolisher 3D side + Prepolisher 3D top
- Pulido: Bison + Renfert Polish 3D-printed materials
- Pulido de alto brillo: Disco de cuero + Disco de trapo de algodón

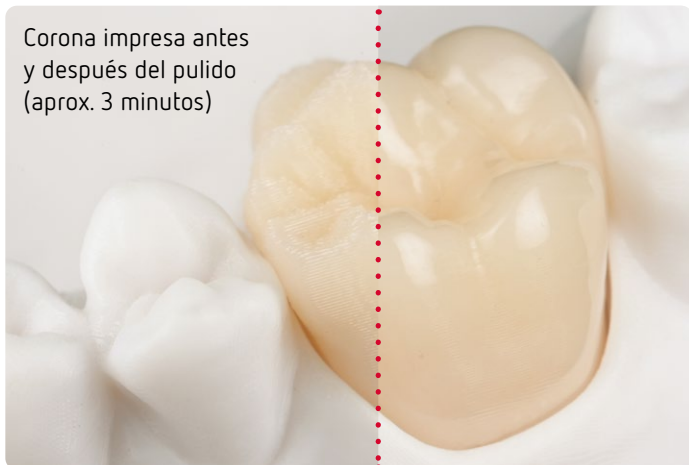

Corona impresa antes y después del pulido (aprox. 3 minutos)

## Referencias

Renfert Polish 3D-printed materials	Pasta de pulido 13 g	No. 5104000
Prepolisher 3D top	17 mm, 1 pieza	No. 880000
Prepolisher 3D side	26 mm, 10 piezas	No. 870000
Bison	14, 18 mm, 25/100 piezas	No. 76xxx00
Disco de cuero	22 mm, 5 piezas	No. 2081000
Disco de trapo de algodón	22 mm, 12 piezas	No. 2051000
Renfert Polish 3D-printed materials	Kit inicial	No. 5104000