

The Renfert logo consists of the word "Renfert" in a white, bold, sans-serif font, centered within a red rectangular background. The text is flanked by two white, curved lines that resemble a stylized 'R' or a protective shield.

making work easy

A close-up photograph of a dental technician wearing blue nitrile gloves. The technician is using a dental handpiece with a red, circular, multi-faceted polishing bur to polish a 3D-printed tooth. The tooth is held in the technician's left hand, and the handpiece is held in the right hand. The background is a soft, out-of-focus blue and white, suggesting a clinical setting.

# Renfert Polish 3D-printed materials

**NOVITÀ** Sistema di lucidatura per stampa 3D

# NOVITA Renfert Polish 3D-printed materials

Specialista per la lucidatura di materiali polimerici stampati

«Renfert Polish 3D-printed materials» è una pasta per lucidare destinata alle resine stampate in 3D, che leviga in modo controllato le linee di layer e le tracce dei supporti. È stata sviluppata per le resine stampate in 3D ed è adatta all'uso con diverse tecnologie, ad esempio per restauri stampati a filamento in PMMA/PETG e restauri di corone e ponti in resina. Un kit di base con la pasta per lucidare e gli strumenti per la pre-lucidatura e la lucidatura a specchio è disponibile come optional.




## Vantaggi

- Sviluppata specificamente per la lucidatura di provvisori realizzati con tecnologia additiva.
- Superfici lisce e lucide ottenute rapidamente per risultati dall'aspetto naturale, grazie agli utensili coordinati e alla pasta per lucidare sviluppata in modo specifico.
- Garantisce superfici igieniche e un elevato comfort per il paziente grazie alla ridotta formazione di placca e depositi batterici.

## Dettagli

- Prelucidatura: Prepolisher 3D side + Prepolisher 3D top
- Lucidatura: Bison + Renfert Polish 3D-printed materials
- Brillantatura: Disco in pelle + Disco in cotone

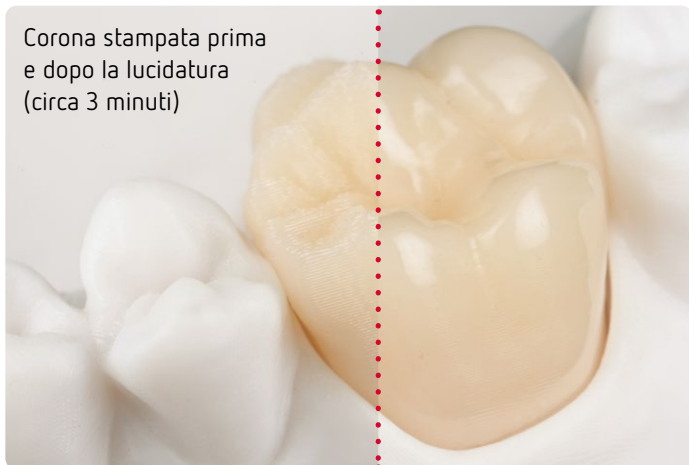

Corona stampata prima e dopo la lucidatura (circa 3 minuti)

## Referenze

Renfert Polish 3D-printed materials	Pasta per lucidare 13 g	No. 5104000
Prepolisher 3D top	17 mm, 1 pezzo	No. 880000
Prepolisher 3D side	26 mm, 10 pezzi	No. 870000
Bison	14, 18 mm, 25/100 pezzi	No. 76xxx00
Disco in pelle	22 mm, 5 pezzi	No. 2081000
Disco in cotone	22 mm, 12 pezzi	No. 2051000
Renfert Polish 3D-printed materials	Kit di base	No. 5104000

